

## MSK 卓上型 圧縮試験機(最大荷重40 kN)

Model : SJ-50B

本機は手動油圧シリンダー方式の圧縮試験機で、石膏、セメント、陶磁器、硝子などのセラミック材品や化成品、錠剤など各種材料の圧縮試験に使用できます。また、小型かつ軽量化されているため、工場現場など、試験機室から離れた場所に持ち込み、現場での試験が可能です。さらに、荷重計測にはロードセルを使用していますので、より正確な計測が行えます。

### ■ 外観

#### ■ 本体



#### ■ アタッチメント等装着時



#### ■ 下部加圧盤 (オプション)



#### ■ 曲げ/圧縮試験用アタッチメント (オプション)



### ■ 特徴

1. 小型かつ軽量
2. 曲げ及び圧縮試験に対応
3. ピークホールド機能付き
4. 使用用途により、秤量の変更及び形状の改造が可能 (オプション)



株式会社 井谷 衡 機 製 作 所


〒146-0091 東京都大田区鶴の木三丁目17番13号  
TEL (03)3758-1161番(代表)  
FAX (03)3758-1164番  
E-mail: itani@jasmine.ocn.ne.jp

## 標準仕様

最大荷重	40kN	本体重量	約25.5kg	表示計重	約2.7kg
加圧方式	手動式 油圧シリンダー				
荷重計測	デジタル表示式ロードセル (本体組み込み済)				
加圧盤直径	上下部 : 100mm (オプション下部加圧盤 : 110mm)				
上下加圧盤間隔	0 ~ 150mm ( ±3mm )				
最大ストローク	110mm				
電源	AC100V				
その他	ピークホールド機能、アナログ出力付				

## 本体寸法

(単位 : mm)

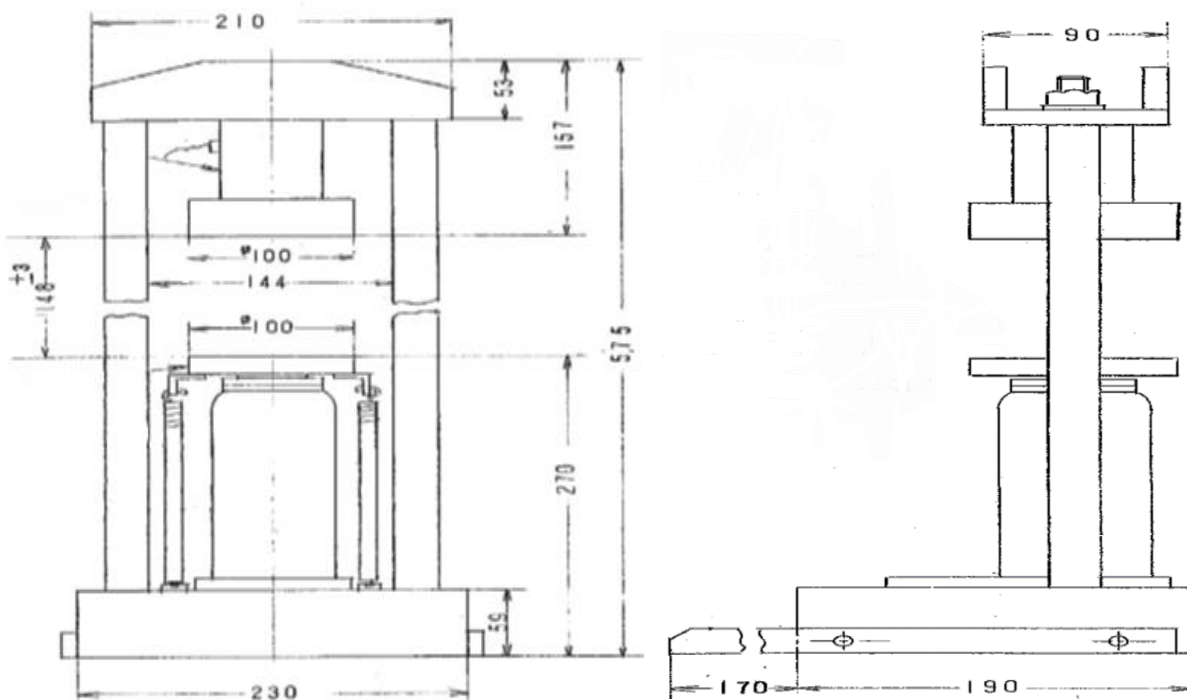

本製品に関する詳細な情報及び御見積りについてのお問い合わせは、当社までご連絡をお願い致します。



株式会社 井谷 衡機製作所

〒146-0091 東京都大田区鶴の木三丁目17番13号  
 TEL (03)3758-1161番(代表)  
 FAX (03)3758-1164番  
 E-mail: itani@jasmine.ocn.ne.jp